


Leaseir MHR

DIODO DE ALTA POTENCIA

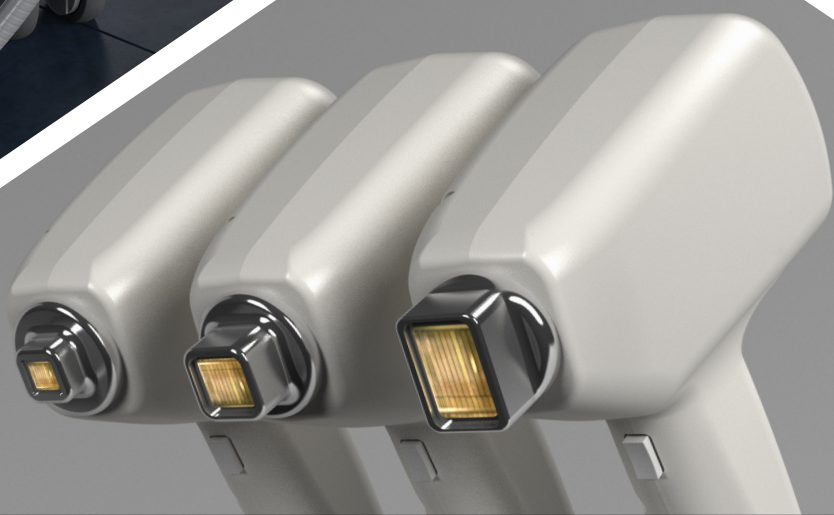

Leaseir

www.leaseir.com

Single
810nm

Dual
810nm

Quad
810nm

Tecnología



LÁSER DE DIODO DE ALTA POTENCIA



CAPAZ DE ACTUAR EN 4HZ A MÁXIMA POTENCIA

Hasta 40 J/cm² en los modos auto, 30ms, 100ms y 400 ms



PIEZA DE MANO REEMPLAZABLE POR EL USUARIO

Facilita el mantenimiento y el cambio de tamaño de spot.



SISTEMA DE FRÍO

Frío continuo cercano a 0°C en la puntera que actúa como anestésico.
Sistema de refrigeración interna que admite trabajar con una temperatura confortable en la sala



Para todo tipo de pieles





Alta productividad

4Hz



**El equipo mas potente del mercado,
capaz de dar 40 J/cm² a 4 hz en 30 ms**

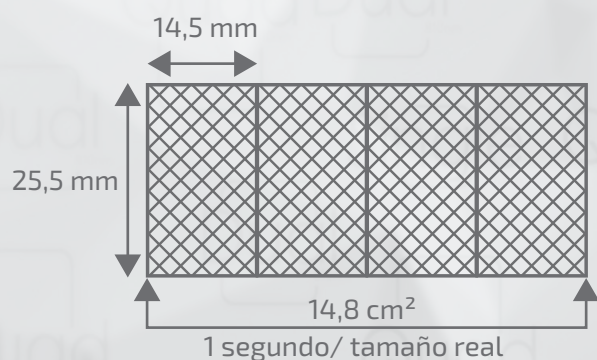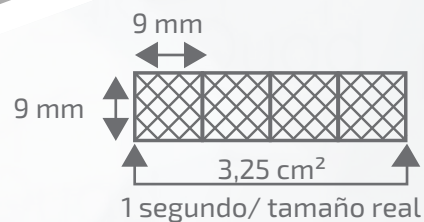

Leaseir MHR proporciona comodidad al usuario gracias a un diseño práctico, basado principalmente en la ergonomía de la pistola y en el pedal de accionamiento, que otorga sencillez y facilidad de uso.

Leaseir MHR puede tratar extensas superficies del cuerpo a 4Hz, manteniendo la temperatura de la puntera cercana a 0°C, con fluencias y modos recomendados en los estudios clínicos originales.

Mediante el proceso de fototermólisis selectiva, se logra la destrucción específica de la estructura celular debido al aumento térmico inducido por el láser de diodo.

☺ Tiempo estimado de tratamiento en piernas (5000 cm²)



	Single	Dual	Quad
Spot	0,81 cm ²	2 cm ²	3,7 cm ²
Cm ² /s	3,24	8	14,8
Duración (s)	1.543	625	338
Duración (min)	26	10	6
Tratamiento total	30-35 min	15-20 min	10-15 min

Interfaz Intuitivo

Aumente su capacidad de trabajo

Leaseir MHR optimiza la forma de trabajo del usuario bajo un nuevo interfaz más intuitivo.


Permite la visión de todos los parámetros seleccionados en una sesión en una única pantalla.

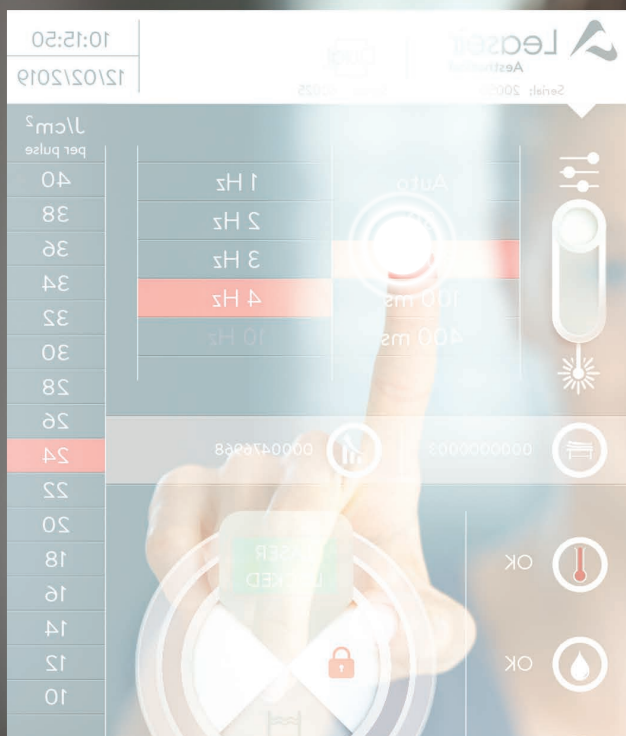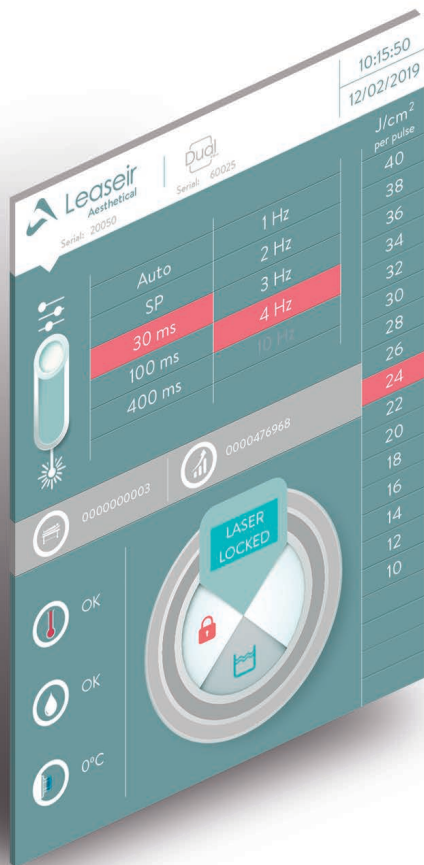

Pantalla táctil 15" con tecnología LED-wire resistiva
Incorpora tratamiento antirreflejos.
Sistema táctil incluso con guantes.



Experiencias

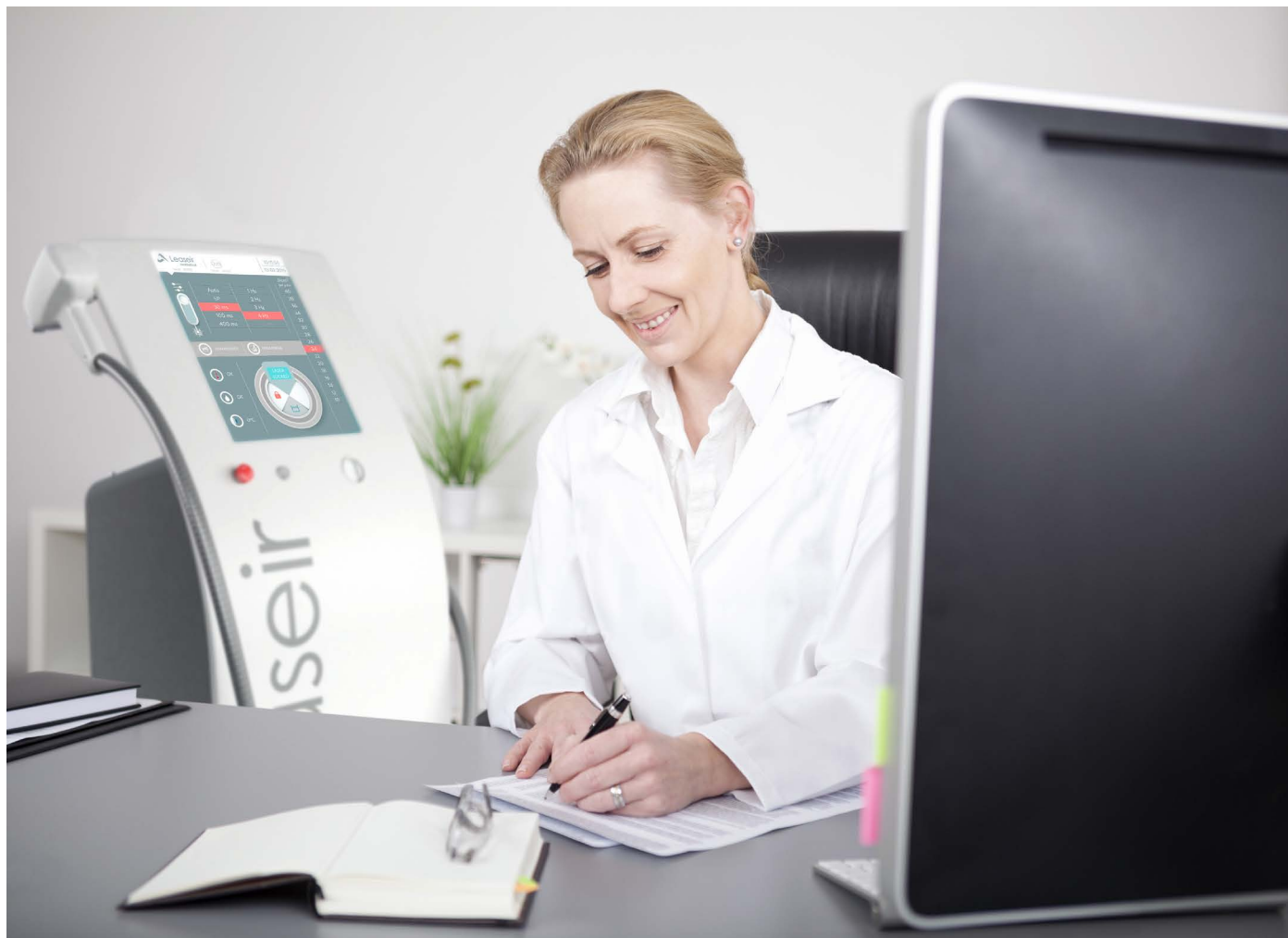

Con Leaseir MHR los tratamientos son rápidos, indoloros y eficaces por lo que el profesional logra los resultados buscados y la satisfacción de sus clientes.

“ En Clínica Calatayud tomamos la decisión de adquirir el equipo Leaseir, y fue todo un acierto ya que los resultados están siendo extraordinarios. Leaseir es un equipo que reúne todas las características que buscábamos para ofrecer a nuestros clientes el mejor sistema de depilación: rapidez, potencia, seguridad y lo más importante: resultados.


Gracias a su potente sistema de refrigeración la sensación de molestia es muchísimo menor a otros sistemas que habíamos probado, así como sus modos de trabajo que permite hacer una depilación segura y efectiva según diagnóstico del cliente. ”

Rafael Calatayud
Gerente Clínicas Calatayud

Resultados probados

Reducción efectiva del vello para todo tipo de pieles y durante todo el año

Con el Leaseir MHR se obtienen resultados desde la primera sesión. Leaseir MHR está diseñado para depilar todo tipo de pieles en cualquier época del año. Además, su puntera láser con una temperatura continua cercana a 0°C actúa como anestésico.

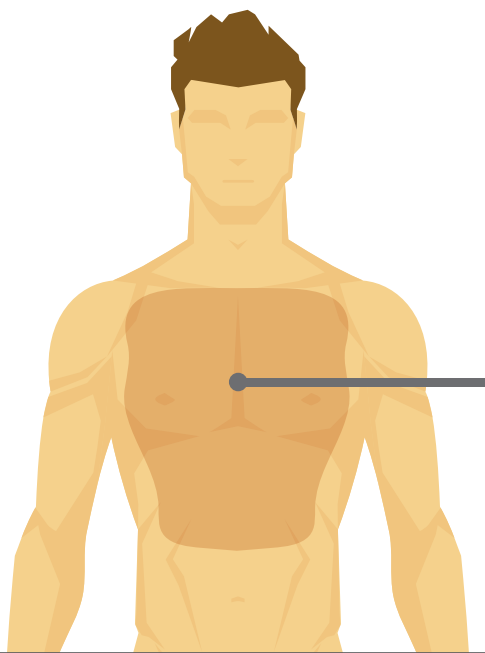

Leaseir MHR es el láser más productivo y efectivo el mercado. Su modo auto le permite trabajar con pulsos muy cortos y de alta intensidad a 4Hz.

Estos modos de trabajo son óptimos desde la 3ra / 4ta sesión para eliminar por completo el vello residual. Pulsos cortos de alta intensidad y a alta velocidad permiten una eliminación efectiva del vello en las últimas sesiones, siendo este el principal motivo de satisfacción del cliente.

Gracias a su sistema de frío, la puntera y el zafiro aportan un efecto de frío continuo, asegurando un tratamiento satisfactorio.

Antes de primera sesión- tipo IV



Después de primera sesión



Después de segunda sesión



Después de tercera sesión



Características

EQUIPO

TEMPERATURA PUNTERA	0° a 3°C
EQUIPO CONSOLA	Alto 110 cm x Ancho 45 cm x Profundo 57 cm
PESO	50,5 Kg.
CONDICIONES AMBIENTALES	15°-25°C / 59-77 F / 0-90% Humedad / 54-101.3 KPa
CLASIFICACIÓN LÁSER	4 según EN60825-1

DATOS LÁSER

	Single	Dual	Quad
TASA DE REPETICIÓN	1 a 4 Hz y 10 Hz en modo SP		
TAMAÑO DEL SPOT	9 X 9 mm	13,5 X 15 mm	14,5 X 25,5 mm
LONGITUD DE ONDA	810 nm		
FLUENCIA	40 J/cm ² , 30 ms		30 J/cm ² , 30 ms
DURACIÓN PULSO	de 1 a 400ms		de 2 a 400ms

OTRAS CARACTERÍSTICAS


Aseguramos el diodo con contrato de mantenimiento

Sin consumibles, ni punteras, ni fibras, ni gas criógeno

Servicio técnico propio

Diseñado y fabricado en España

LA TECNOLOGÍA DE LASER DE DIODO MÁS AVANZADA Y A MÁXIMA POTENCIA

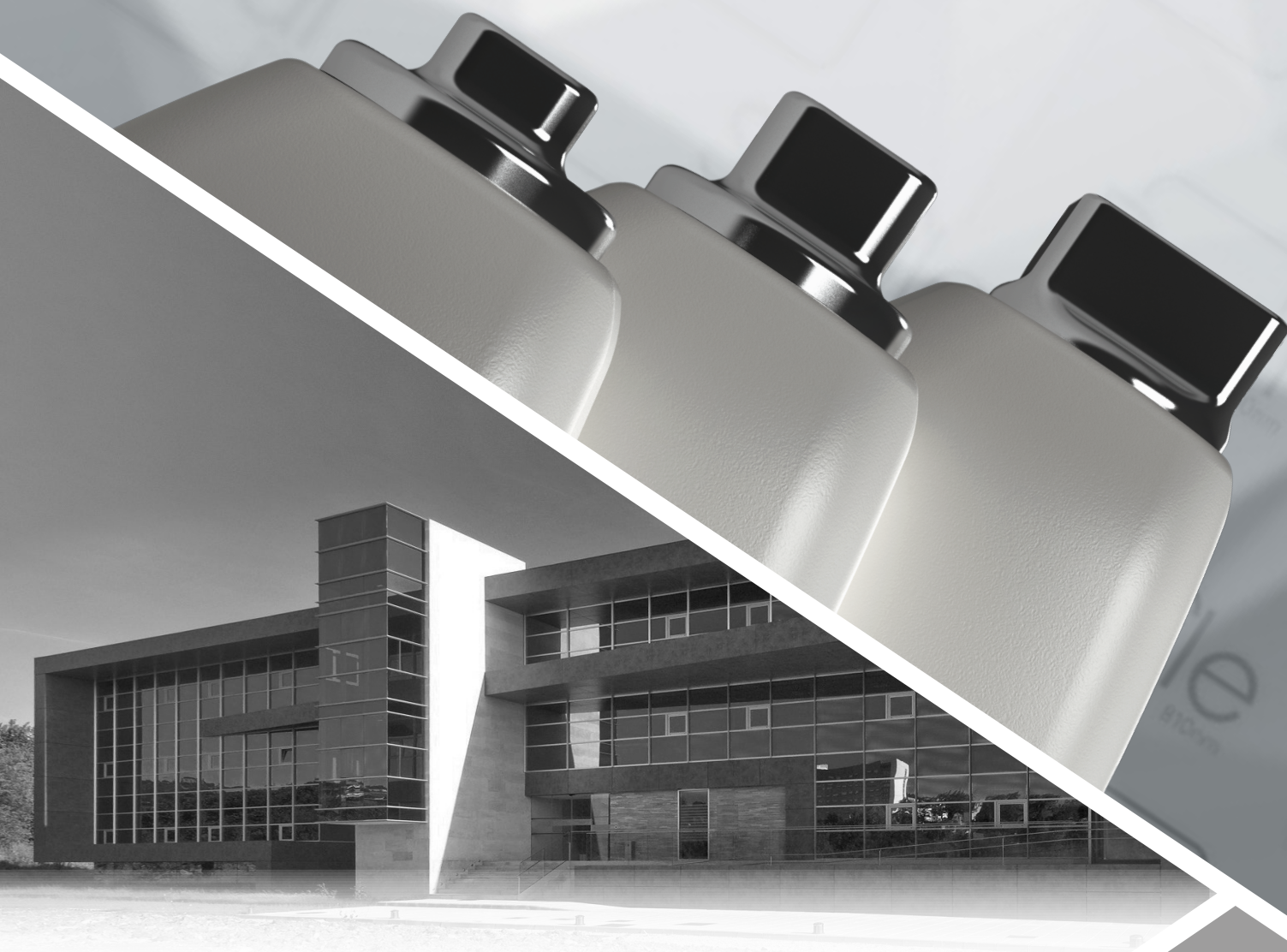

Los profesionales que integramos **Leaseir Medical Light** llevamos más de 18 años trabajando a la vanguardia de la tecnología de laser de diodo. Estamos comprometidos con las necesidades de los profesionales y estamos seguros de proporcionar los resultados que demandan sus clientes.

Nuestro principal objetivo es la calidad, por ello nuestros equipos disponen de los estándares requeridos para los equipos de su categoría



Leaseir

DATOS DE CONTACTO

OFICINA CENTRAL

Edificio Asturias
Parque Científico y Tecnológico
C/ Jimena Fernandez de la Vega, 140
33203 Gijón (Asturias) - SPAIN
+34 984 390 934
info@leaseir.com