

Especificaciones



Rango de mediciones

Esfera	-29.00D~+26.75D
	Pasos: 0.12D、0.25D、1D
Cilindro	-8.75D~+8.75D
	Pasos: 0.25D、1D
Eje	0°~180°, Pasos: 1°、5°
Prisma	0△~20△, Pasos:0.1△、0.5△
Prisma ángulo basal	0°~360°, Pasos: 1°、5°
PD	48mm~82mm (Modo lejano) /49mm~75mm (distancia de trabajo de 35 cm)

Lentes axiliares

Lente automático de cilindro cruzado	±0.25D、±0.50D
Lente de cilindro cruzado	±0.50D
Agujero estenopéico	φ1mm
Lente de chequeo PD	√
Filtro rojo / verde	Red(Right) / Green(Left)
Filtros polarizados	Right: 45°, Left:135°; Right:45°/0.125D, Left:135°/0.125D
Filtros polarizados circulares	√
Varilla de maddox	Right: Red, Horizontal; Left:Wight, Vertical.
Esfera de retinocopia	+1.5D、+2.0D
Prima descomposición	Right:6△BU;Left:10△BI

Ajuste de apoyacabeza	14mm
Distancia de refracción para visión cercana	150mm~400mm
Angulo de visión	40°
Distancia del vértice	12mm、13.75mm、16mm、18mm、20mm
Ajuste de nivel horizontal	±2.5°
Fuente de poder	AC 220V,50Hz, Power 70VA
Dimensiones	400mm (W) ×92mm (D) ×275mm (H) /3.9kg
Dimensiones de la impresora	200mm (W) ×200mm (D) ×80mm (H) /0.6kg

Todos los índices que se hacen referencia en este catalogo pueden ser modificados sin previo aviso.
Nuestra compañía se reserva el derecho de interpretación final.



YPA-2100 REFRACTOR

YPA-2100 with advanced technology services you.
YPA-2100 provides satisfactory examination to pa-
tients who suffer from visual acuity problems.



5 Danlong Road, Nan' an District, Chongqing,400060,China
yeasn@yeasn.com sales@yeasn.com
www.yeasn.com (86-23)62797666




Diseño robusto

Lentes de alta calidad, mecanismos sólidos y materiales resistentes a la corrosión, presentan un excelente rendimiento y durabilidad. Rápidamente carga lente que ayuda a minimizar la interferencia y la fatiga de los ojos de los pacientes. La operación silenciosa ofrece más comodidad durante el examen.




Control de Tablet PC

El proceso optometría se realiza en el tablet de alta resolución. Doctor puede comunicarse con el paciente fácilmente en cualquier posición. La optometría es más eficiente que las operaciones convencionales.

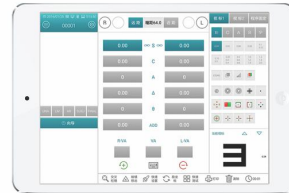

Software inteligente

El YPA-2100 ofrece varias características inteligentes, como carga automática de lentes auxiliares, cilindro cruzado, ajuste de PD independiente. GUI muestra abundante información y es fácil de aprender.

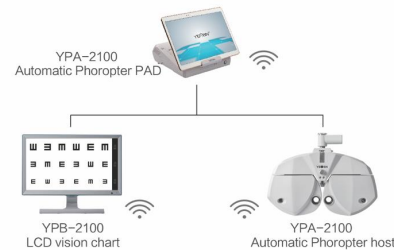


Sistema integrado

YPA-2100 se comunica con la pantalla de optotipos modelo YPB-2100 (fabricado por YEASN) a través de red inalámbrica. Todas las funciones del YPB-2100 se pueden controlar con el PAD del YPA-2100.



Proceso personalizado

El software proporciona un conjunto de procesos de examen estándar, y los doctores pueden personalizar 8 conjuntos de procesos de optometría según su experiencia. Este software guía al doctor a través de todos los exámenes. Conveniente y eficiente.

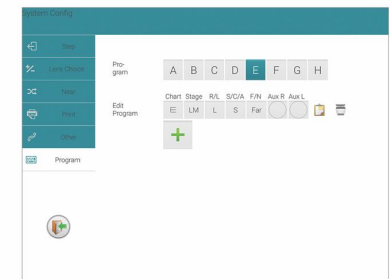

Transferencia de datos

YPA-2100 puede comunicarse con LM, AR para la transmisión de datos. Es posible transferir datos de una AR o LM a múltiples unidades de YPA-2100, también permite la comunicación con PC y bases de datos médicas.



Diseño ergonómico

El hermoso diseño curvilíneo y liviano se adapta perfectamente a un espacio pequeño y presenta un examen cómodo. Con un ángulo de visión de 40 grados, los resultados de las pruebas se pueden asegurar de manera práctica y precisa.



Impresora alta velocidad con cortador automático

La impresora de alta velocidad con cortador automático funciona en forma rápida y silenciosa. Los datos de medición se presentan en forma sencilla y fácil para explicarlos a los clientes.



Simplicidad
Revestido con precisión

Todo detalle es remodelado, integrado
en un diseño aparentemente
excelente y preciso